

ProRhinel[®] Extra

Eucalyptus

Spray nasal

Eau de mer naturelle hypertonique
Avec huile essentielle d'eucalyptus

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser Prorhinel Extra Eucalyptus, spray nasal. Si vous avez des questions, demandez à votre médecin ou votre pharmacien.

Au cours d'un rhume, l'inflammation provoque un gonflement de la muqueuse nasale, un nez bouché et augmente la production de mucus. L'hypertonie* de l'eau de mer crée une différence de pression entre la solution et la muqueuse nasale (effet osmotique), ce qui aide à diminuer le gonflement des voies nasales. Le produit permet aussi de ramollir et fluidifier le mucus en excès, et aide à éliminer les bactéries et les virus du nez.

** Les solutions d'eau de mer hypertoniques diffèrent des solutions d'eau de mer isotoniques du fait de leur concentration en sel optimisée à 2,2% pour réduire de manière efficace la congestion nasale. Cette concentration saline est suffisamment douce pour respecter la muqueuse nasale.*

1. Qu'est-ce que Prorhinel Extra Eucalyptus, spray nasal et dans quel cas l'utiliser?

Prorhinel Extra Eucalyptus est un spray nasal sans conservateur contenant de l'eau de mer naturelle hypertonique ainsi que de l'huile essentielle d'eucalyptus et de l'extrait de menthe sauvage. La solution non diluée préserve également la richesse de tous les minéraux et oligo-éléments importants contenus dans l'eau de mer, tels que le calcium, le magnésium, le fer et le zinc.

Prorhinel Extra Eucalyptus, spray nasal est un décongestionnant nasal naturel et intense qui:

- Décongestionne rapidement le nez en moins de 3 minutes

- Procure un soulagement naturel et efficace de la congestion nasale (nez bouché ou congestionné) due aux rhumes et rhinosinusites, en réduisant le gonflement nasal.
- Aide à prévenir l'extension d'infections:
 - Par son action purifiante qui libère les voies nasales,
 - En aidant à éliminer du nez les bactéries et virus piégés dans le mucus.
- Procure une sensation immédiate de soulagement et de fraîcheur,
- A un effet non-desséchant, en hydratant les fosses nasales.

Prorhinel Extra Eucalyptus, spray nasal peut aussi aider à réduire le besoin de décongestionnants médicamenteux.

Prorhinel Extra Eucalyptus, spray nasal est adapté aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.

2. Avant d'utiliser Prorhinel Extra Eucalyptus, spray nasal

Ne pas utiliser ce produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients.

Après une opération du nez ou une blessure, consulter un médecin avant d'utiliser le spray.

Ne pas utiliser ce produit chez un enfant de moins de 6 ans.

Ne pas utiliser ce produit durant la grossesse ou l'allaitement.

Ne pas utiliser un produit cassé ou endommagé.

3. Comment utiliser Prorhinel Extra Eucalyptus, spray nasal?

Réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.

1 pulvérisation dans chaque narine jusqu'à six fois par jour.

Mode d'emploi:

1. Se moucher.
2. Agiter le flacon avant utilisation.
3. Retirer le capuchon protecteur du spray (**figure 1**).
4. Avant la première utilisation, amorcer la pompe en effectuant quelques pressions jusqu'à ce qu'une pulvérisation franche soit libérée dans l'air. Veiller à ne pas vaporiser dans les yeux ou la bouche.
5. Tenir le flacon à la verticale avec le pouce sous le flacon et l'embout entre deux doigts.
6. Pencher la tête légèrement vers l'avant et insérer l'embout dans la narine (**figure 2**).
7. Vaporiser en respirant et respirer doucement par le nez.

- Répéter dans l'autre narine.
9. Laisser agir le produit pendant quelques minutes.
Ne pas se moucher pendant ce temps, mais l'essuyer si nécessaire.
10. Puis, se moucher si besoin.



Figure 1



Figure 2

Pour des raisons d'hygiène, afin d'éviter la contamination:

- Après chaque utilisation, laver l'embout avec de l'eau chaude, le sécher et remettre le capuchon de protection dessus.
- Le spray doit uniquement être utilisé par une seule personne.

4. Pour votre sécurité

Si les symptômes persistent plus de 10 jours, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

En cas d'irritation nasale, des picotements temporaires peuvent apparaître lors de l'utilisation.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

5. Comment conserver Prorhinel Extra Eucalyptus, spray nasal?

Conserver le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Ne pas utiliser le produit plus de 6 mois après la première utilisation.

Conserver à une température entre 0 °C et 25 °C.

Conserver dans l'emballage d'origine.

6. Autres informations

Ingrédients: eau de mer (hypertonique concentrée à 2,2% en sel), huile essentielle d'*Eucalyptus globulus*, extrait de menthe sauvage.

Sans conservateur. Sans gaz propulseur.


Prorhinel Extra Eucalyptus est disponible en flacon doseur de 20 ml.

Fabriqué par:

Laboratoire de la Mer, Avenue du Général Patton,
35400 Saint-Malo, France

Distribué par:

Novartis Santé Familiale S.A.S.
14 boulevard Richelieu - BP 440
92845 Rueil-Malmaison Cedex, France

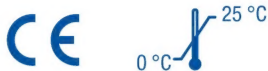

Date: mai 2012.

FR 921525
NO 52068647-01
PRO.FR.EUCA20.1.N

 **NOVARTIS**